

#PF201-0.25

250 μL 反応用

Lot :

Expiry Date :

in vitro research use only

開封前保存温度：-80℃

Sep 2017

ジーンフロンティア株式会社
www.genefrontier.com

〒277-0882
千葉県柏市柏の葉 5-4-19
東大柏ベンチャープラザ 308

Kit components

- Solution I

125 μL

内容：アミノ酸、NTP、tRNA、酵素の基質など
開封後保存温度：-20℃
- Solution II ^{*1}

12.5 μL

内容：タンパク質 (30% グリセロール溶液)
開封後保存温度：-20℃ または -80℃ ^{*2}
- Solution III ^{*3}

25 μL

内容：リボソーム (20 μM)
開封後保存温度：-80℃ ^{*2}
- DHFR DNA ^{*3,4}

10 μL

内容：大腸菌 DHFR 遺伝子を含む PCR 産物 (20 ng/μL)
開封後保存温度：-20℃

Introduction

PUREfrefx[®] について

PUREfrefx[®] は、PURE system を基に開発された再構成型無細胞タンパク質合成キットです。PUREfrefx[®] に、目的のタンパク質をコードする DNA (または mRNA) を添加してインキュベートするだけで、目的タンパク質を合成できます。

PURE system は、東京大学大学院の上田卓也教授のグループにより開発された再構成型無細胞タンパク質合成系で、転写・翻訳・エネルギー再生に必要なタンパク質、リボソームを個別に精製した後、アミノ酸、NTP などと混合した合成系です (Ref. 1, 2)。精製因子を混合した反応液を使用するため、組成を自由に調節できる、タンパク質合成に無関係なタンパク質をほとんど含まないなどの特長があります。

PUREfrefx[®] は、反応液を構成するタンパク質、リボソーム、tRNA の調製方法を改良し、純度を高めた合成反応液です。特に、混入していた大腸菌由来のリボ多糖は、反応液 1 μL あたり 0.1 EU 程度にまで低減されています。また、RNase、β ガラクトシダーゼなどの混入タンパク質も減少しています。

PUREfrefx[®] に含まれる翻訳因子などのすべてのタンパク質には、精製、検出用のタグ配列が付加されていません。そのため、タグ配列を付加したタンパク質を合成し、タグ配列により精製、検出することが可能です。

References

1. Shimizu *et al.* (2001) *Nat. Biotechnol.*, vol. 19, p. 751

2. Shimizu *et al.* (2005) *Methods*, vol. 36, p. 299

Kit components

- 開封前の保存温度は、すべて -80℃ です。
- *1)

PUREfrefx[®] 2.1 (#PF213) に添付されている Solution II と同一組成の溶液です。
- *2)


使用後の残りの反応液を -80℃ で凍結保存する場合、液体窒素やドライアイス/エタノールなどで急速凍結してから保存してください。また、必要に応じて分注し、凍結融解の繰り返しをできるだけ避けてください。
- *3)

PUREfrefx[®] 1.0 (#PF001)、PUREfrefx[®] 2.1 (#PF213) に添付されている Solution III、DHFR DNA とそれぞれ同一組成の溶液です。
- *4)

タンパク質合成の陽性コントロール用として使用する際は、20 μL の合成反応液に 1 μL を添加してください。詳細な塩基配列は、弊社の web site に掲載されています。

Template DNA

1. 鋳型 DNA の構造

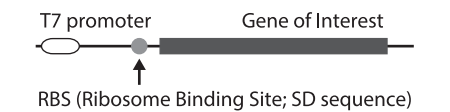

PUREfrefx[®] によるタンパク質合成に使用する鋳型 DNA には、目的タンパク質をコードする遺伝子の開始コドンの上流に、T7 プロモーター配列およびリボソーム結合部位 (SD 配列) が含まれている必要があります。また、終止コドンの下流には、10 塩基以上の任意の塩基配列を付加してください。

PUREfrefx[®] では、3 種類の終止コドンですべて使用できます。

環状 DNA (プラスミド DNA など)、および直鎖状 DNA (PCR 産物や環状 DNA を制限酵素で切断した DNA など) のどちらも鋳型 DNA として使用できます。環状 DNA を使用する場合は、目的遺伝子の終止コドンの下流に T7 ターミネーターが必要です。一方、直鎖状 DNA では、T7 ターミネーターの付加は必ずしも必要ではありません。


Protocol

- PUREfrefx[®] 2.0 を用いたタンパク質合成は、任意の反応液量で行うことができます。例えば、液量 20 μL で合成する場合は以下のように反応液を調製してください。
- Solution I を、室温〜37℃ で 1 分間ほど温めて完全に融解し、氷上に置きます。
 - Solution II、Solution III を氷上で融解します。
 - 融解した Solution I、II、III を軽くボルテックスした後、遠心して内容物をチューブ下部に集めます。
 - 以下のように反応液を調製します。
(DNA は 1 kbp あたり 0.5-3 ng/μL になるように添加してください。)
- | | |
|--------------|--------|
| Water | 7-X μL |
| Solution I | 10 μL |
| Solution II | 1 μL |
| Solution III | 2 μL |
| Template DNA | X μL |
| Total | 20 μL |
- 37℃ で 2〜6 時間反応させて、タンパク質を合成します。
 - 合成されたタンパク質を、それぞれの目的に使用します。

Template DNA

2. 鋳型 DNA の調製法の例

PCR を用いた PUREfrefx[®] の鋳型 DNA の調製方法の例を示します。

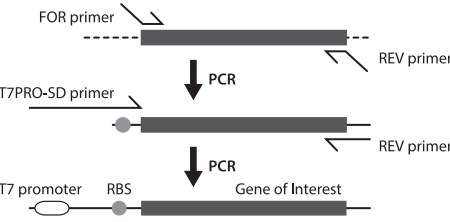

3. プライマーの配列

FOR primer
5' - AAGGAGATATACCA - ATG - N (10-20) - 3'
RBS

REV primer
5' - GGATTAGTTATTCA - TTA - N (10-20) - 3'
more than 10 any nucleotides

T7PRO-SD primer
5' - GAAATTAATACGACTCACTATAGG GAGACCACAACGGTTTCCC
T7 promoter

TCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCA - 3'
RBS

Note

PUREfrefx[®] は研究用試薬です。ヒトを含む動物などへの投与、臨床、診断など他の用途への使用を禁じます。また、食品、家庭用には使用しないでください。

PUREfrefx[®] を使用する際には、RNase フリーの水、試薬、器具類を使用してください。また、手袋、マスクの着用をお勧めします。

本製品は、国立大学法人東京大学より、特許第 4931135 号の使用許諾を得た製品です。PUREfrefx は、ジーンフロンティア株式会社の登録商標 (登録商標第 5443077 号) です。

Distributor

人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>
● 営業部 (お問い合わせ)
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620